

HZ-3818 und HZ-3838

Elektrische Massageliege mit Heizfunktion



Bedienungsanleitung

1. Leistungsmerkmale

Bei der H3818A handelt es sich um eine hochwertige vollelektrische Massageliege mit elegantem, luxuriösem Design. Das robuste Gestell verleiht der Liege sehr hohe Stabilität.

Durch 4 kraftvolle und leise Elektromotoren lassen sich die Höhe sowie die Neigung der Rückenlehne, des Fußteiles und die Neigung der ganzen Liege vielfältig verstellen.


Die Verstellung und Bedienung der Liege erfolgt mit Hilfe der programmierbaren Fernbedienung.

Mittels drei Speichertasten auf der Fernbedienung können 3 bevorzugte Behandlungspositionen individuell gespeichert und auf nur einen Knopfdruck wiedereingestellt werden.


Die H3818A ist dank dicker Polsterung sehr komfortabel. Der hochwertige 1,3 mm starke Bezug aus Kunstleder ist sehr pflegeleicht.

Absenkbare Armlehnen können mit Hilfe von Gasdämpfer manuell bis zu 25 cm nach unten verstellt werden.

2. Abmessungen:

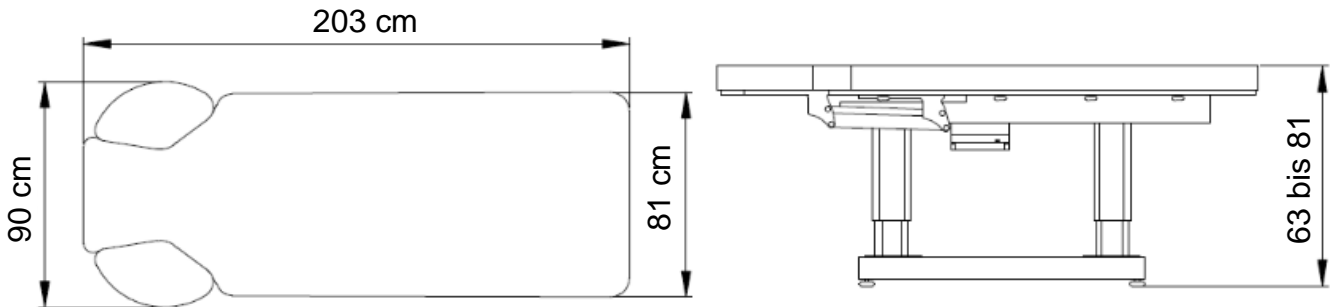

3. Fernbedienung

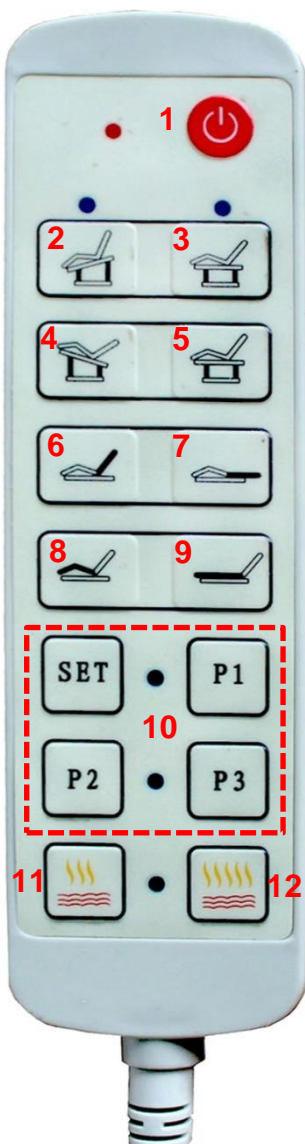

1: Ein- / Ausschalten der Liege (Das Stromkabel muss vorher an die Steckdose angeschlossen werden)

2 und **3:** Mit den Tasten 2 und 3 können Sie die ganze Liege nach links kippen (Kopfteil höher als Fußteil) und wieder flach stellen

4 und **5:** Mit den Tasten 4 und 5 können Sie die ganze Liege nach rechts kippen (Fußteil höher als Kopfteil) und wieder flach stellen

6 und **7:** Mit den Tasten 6 und 7 können Sie den Neigungswinkel der Rückenlehne einstellen

8 und **9:** Mit den Tasten 8 und 9 können Sie die Kniestütze höher und tiefer einstellen

10: Programmier Tasten zum Speichern und Abrufen von Positionen der Massageliege. Mit Tasten P1 bis P3 haben Sie die Möglichkeit drei individuelle Liegepositionen nach Ihren Wünschen zu speichern. Fahren Sie dazu die Massageliege durch Drücken der Einzelfunktionstasten 2 bis 9 in die gewünschte Position. Drücken Sie 3 mal hintereinander, oder 1 mal 3 Sekunden



die Taste SET und dann unmittelbar die gewünschte Programmtaste P1, P2 oder P3. Die gespeicherte Liegeposition wird durch einen kurzen Signalton bestätigt. Nun ist Ihre individuelle Behandlungsposition gespeichert und kann jederzeit durch direktes Drücken von P1, P2 oder P3 abgerufen werden. Die Programmtasten P1 bis P3 können durch Wiederholen des beschriebenen Speichervorgangs jederzeit wieder neu belegt werden.

11 und **12:** Tasten für die Temperatureinstellung der Heizfunktion

4. Verstellung der Armstützen



Drücken Sie den Einstellhebel gemäß der Pfeilrichtung und drücken Sie die Armstütze nach unten, um diese in die Wunschposition zu bringen. Falls Sie nur den Hebel betätigen und die Stütze nicht drücken, rutscht diese in die Ausgangsposition (oberste Stellung).

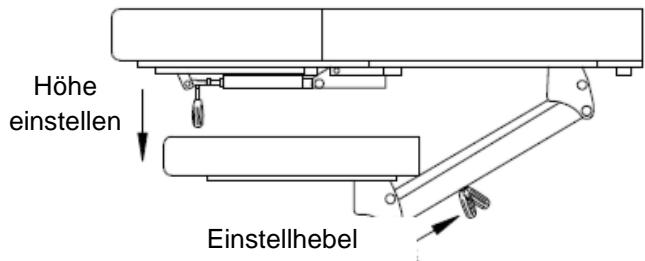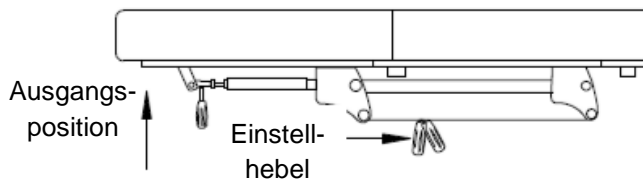

5. Optionales Zubehör

Frotteebezug



4 Zusatzrollen



6. Technische Daten

Modell-Nr.	HZ-3838, HZ-3818
Länge Gesamt	203 cm
Länge Rückenlehne	80 cm
Länge Sitz/Fußteil	120 cm
Breite	81 cm
Höhe	von 65 bis 83 cm
Verstellung der Rückenlehne	80°
Armstützen	35 x 17 cm
Belastbarkeit ohne Rollen	200 kg
Belastbarkeit mit Rollen	170 kg
Höhe der Rollen	7 cm
Maße des Gestells	125 x 50 cm
Gewicht	108 kg
Stromanschluss Liege	220V, 50HZ, 160W
Heizung	220V, 50HZ, 75W

7. Sicherheitshinweise:

1. Personen mit Osteoporose oder Herzproblemen sollte dieses Massagebett nicht benutzen.
2. Frauen, die schwanger sind oder die Menstruation haben, sollten dieses Massagebett nicht verwenden.
3. Personen mit Behinderungen sollten dieses Massagebett nicht benutzen.
4. Kinder unter 14 Jahren ohne Aufsicht und bewusstlose Personen sollten dieses Massageliege nicht benutzen.
5. Brüche des Netzkabels und des Steckers sollten vor der normalen Verwendung beseitigt werden. Brüche sollten von Fachleuten oder Dienstleistern behoben werden.
6. Die Spannung sollte mit der Sicherheitsspannung übereinstimmen, bevor sie offiziell verwendet wird. Und die falsche Spannung kann zum Ausfall des Produkts führen.
7. Nasse Hände dürfen keinen Strom berühren, um den Stromschlag zu vermeiden.
8. Das Produkt sollte nicht angeschlossen werden, bevor es komplett montiert ist.
9. Das Netzkabel sollte so verstaut werden, dass die Patienten, sowie Mitarbeitern nicht stolpern und fallen können.
10. Die Reinigung des Produkts sollte durch die Verwendung des weichen Handtuchs mit verdünntem neutralem Reinigungsmittel durchgeführt werden.
11. Es sollte von dem Strom getrennt werden, wenn es nicht verwendet wird.
12. Demontieren Sie diese Liege nicht ohne Genehmigung. Bitte informieren Sie bei Bedarf die offiziellen Dienstleister, um die Wartungsarbeiten durchzuführen.