

# Bedampfer F-900F

## Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt F-900F entschieden haben! Für einen einwandfreien und sicheren Gebrauch lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor Behandlungsbeginn. Behalten Sie dieses Handbuch, als Nachschlagewerk für die zukünftige Verwendung des Gerätes. Für alle Folgen, die aufgrund einer unsachgemäßen Verwendung des Gerätes auftreten, übernimmt unser Unternehmen keine Verantwortung.

Für folgende Bedienungsanleitung behält unser Unternehmen das Recht, die Korrekturen bzw. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Falls Sie (ein Kunde) einen Fehler in der Bedienungsanleitung finden oder einen Verbesserungsvorschlag hätten, so teilen Sie uns dies bitte mit.

### I. Geräte- und Funktionsbeschreibung:

1. F-900F ist ein Kosmetik- bzw. Hautschönheitsgerät mit einem ultraschmalen Gehäuse im neuen Design, mit einem flexiblen Sprüharm und einem temperaturresistenten und bruch sicheren Wasserbehälter. Die Arbeitszeit- und Heizrohreinstellungen werden mit Computerchip gesteuert und UV-Lampe kann durch einen Schalter ein- und ausgeschaltet werden. Mit seinen vielen integrierten Funktionen schafft F-900F einen großen Durchbruch in der Welt der traditionellen Schönheitsgeräte.
2. Eine Bedampfung mit dem durch aktive Sauerstoffmoleküle (Ozon) angereicherten Wasserdampf trägt zur Beschleunigung des Blutkreislaufs bei, versorgt die Hautzellen mit Feuchtigkeit und hat eine pflegende sowie eine sterilisierende Wirkung auf die Haut.
3. Durch einen Einsatz der entsprechenden Medikamente eignet sich F-900F für die Behandlungen von Akne und schwarzen Flecken, Teleangiektasie und Entzündungen der Haut, ermöglicht Hautaufhellung und Nährstoffversorgung der Haut.
4. Der neue hochtemperaturresistente, schlagfeste, bruch sichere Wasserbehälter von F-900E besteht aus einem superstarken geruchsneutralen und toxfreien Material.
5. Das einzigartige Design des Ölbehälters ermöglicht eine Belebung/Verbesserung des Raumluft durch ätherische Öle mit verschiedenen Effekten.

### II. Funktionsprinzip:

1. Erweichen der abgestorbenen Hautzellen auf der Hautoberfläche erleichtert eine nachfolgende Hautreinigung und Pflege.
2. Öffnen der Poren erleichtert eine gründliche Tiefreinigung.
3. Der ionisierte Dampf dringt tief in die Poren ein und entfernt aus ihnen die angesammelten Fett und Mitesser sowie Rückstände von Kosmetik.

4. Der ionisierte Dampf kann die Ausscheidung der Toxine durch die Poren fördern.
5. Der ionisierte Dampf kann die Falten vorübergehend erweichen.
6. Förderung der Durchblutung und der Wasserzirkulation in den Hautzellen verbessert den Zellstoffwechsel sowie die Auto-Reparatur-Funktion.
7. Die Verwendung von verschiedenen passenden Kräutern (z.B. traditionellen chinesischen) hat eine positive Wirkung bei der Behandlung von Akne und schwarzen Flecken und fördert die Hautpflege.


### **III. Behandlungsablauf:**

1. Füllen Sie destilliertes Wasser in den Wasserbehälter. Stellen Sie sicher, dass die Wasserhöhe die Maximum-Markierung nicht übersteigt.
2. Stecken Sie den Netzstecker des Stromkabels in eine passende Steckdose.
3. Schalten Sie das Gerät ein. Wenn Sie einen Signalton hören, befindet sich das Gerät im Bereitschaftszustand.
4. Wenn Sie den heißen Dampf brauchen, bitte den Knopf „VAPOR“ drücken, die entsprechende grüne Indikatorlampe soll nun leuchten. Das Heizelement beginnt das Wasser zu erhitzen und nach einigen Minuten wird der Dampf aus der Düse des Sprüharms austreten. Zum Aktivieren der Ozon-Funktion bitte die „OZON“-Taste betätigen, die entsprechende grüne Indikatorlampe soll nun leuchten. Sie werden sehen, dass sich die Menge des austretenden heißen Dampfes erhöht. Beim Absinken des Wasserstands unter die Minimum-Marke, den Thermostat ausschalten (Knopf „VAPOR“) und Wassererhitzung stoppen.
5. Für eine Kräuterbedampfung bitte die Deckelklappe nach oben herausziehen und etwas Kräuter (Chinesische Heilkräuter, Blumen etc., je nach dem gewünschten Effekt) in das medizinische Sieb hinzugeben.
6. Der Sprüharm kann um ca. 120° rotiert und verstellt und somit in die geeignete Position zum zu behandelnden Körperteil des Patienten gebracht werden.

#### **IV. Wichtige Hinweise:**

1. Wenn der Wasserbehälter leer ist oder der Wasserstand unter die Minimum-Marke absinkt, müssen Sie das Gerät ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose herausziehen. Bei einem zu hohen / zu niedrigen Wasserstand darf das Gerät nicht eingeschalten werden, da es sonst zu Geräte- und Brandschäden führen kann. Für diese Schäden übernimmt der Hersteller bzw. der Verkäufer keine Haftung.
2. Wenn Sie das Gerät abkühlen lassen, achten Sie bitte darauf, dass ausreichend Wasser in dem Wasserbehälter ist, sonst schalten Sie das Gerät bitte nicht ein.
3. Im Dampfbetrieb bitte versuchen Sie auf keinen Fall die Sprüharm-Düse zu berühren oder zu öffnen.
4. Wenn das Wasser im Wasserbehälter den Minimum-Stand erreicht hat, bitte das Gerät auf keinen Fall einschalten.
5. Für einen einwandfreien und sicheren Gebrauch unseres Gerätes lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor dem Behandlungsbeginn.
6. Das Gerät darf auf keinen Fall von Kindern benutzt werden. Bitte achten Sie auch darauf, dass keine Kinder während des Gerätebetriebs und innerhalb 1 Stunde nach Abschluss des Gerätebetriebs und Abschaltung des Gerätes in dem Raum spielen, in dem das Gerät aufgestellt ist.

#### **V. Beschreibung des Bedienfeldes:**

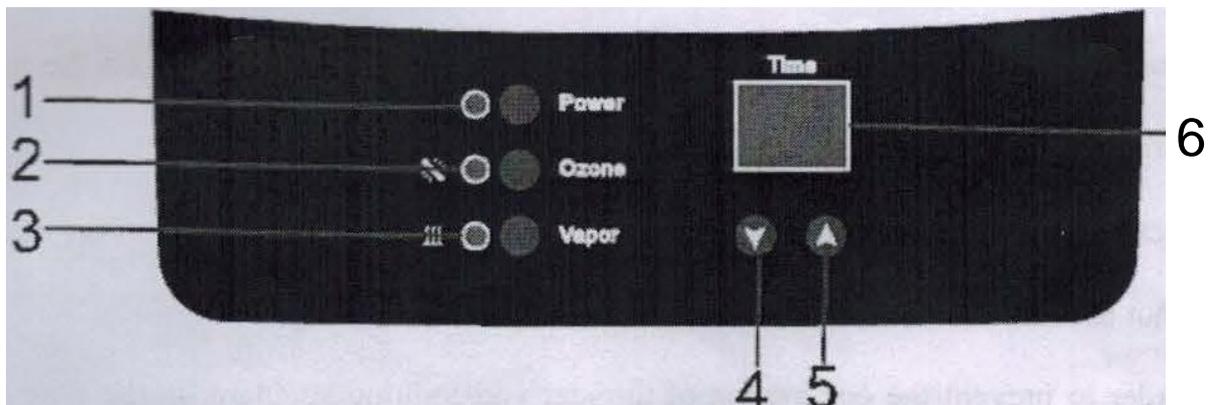

1. Gerät Ein-/Ausschalten
2. Ozon-Funktion Ein-/Ausschalten
3. Dampf (Thermostat) Ein-/Ausschalten
4. Behandlungsdauer-Einstellung: kürzer
5. Behandlungsdauer-Einstellung: länger
6. Zeitanzeige für Behandlungsdauer

#### **VI. Behandlungsmethoden:**

1. Netzstecker des mit einer Steckdose verbinden und das Gerät einschalten
2. Wenn Sie einen Signalton „beep“ hören, ist das Gerät betriebsbereit
3. Drücken Sie den Knopf „Power“, die rote Indikatorlampe leuchtet auf, die Zeitanzeige zeigt 30 Sekunden, die gewünschte Behandlungsdauer kann mit den Knöpfen 4 und 5 eingestellt werden.

4. Füllen Sie destilliertes Wasser in den Behälter bis die Wasserhöhe die Maximum-Markierungslinie auf der Behälterwand erreicht. Drücken Sie den Knopf „VAPOR“, die entsprechende grüne Indikatorlampe soll nun leuchten. Das Wasser wird erhitzt und nach einigen Minuten wird der Dampf aus der Düse des Sprüharms austreten. Zum Aktivieren der Ozon-Funktion bitte die „OZON“-Taste betätigen, die entsprechende grüne Indikatorlampe soll nun leuchten. Sie werden sehen, dass sich die Menge des austretenden heißen Dampfes erhöht. Beim Absinken des Wasserstands unter die Minimum-Marke, den Thermostat ausschalten (Knopf „VAPOR“) und Wassererhitzung stoppen. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, werden alle Funktionen des Geräts automatisch deaktiviert.

**Bitte Folgendes beachten!**

- Keine ölige, ölhaltige, staub- und pulverartige Substanzen dürfen in den Wasserbehälter geraten, damit die Sprühdüse nicht verstopft wird
- Die Sprühdüse nicht direkt auf das Gesicht des Patienten richten, sonst besteht es eine Verbrennungsgefahr
- Das Gerät nicht ohne Wasser oder mit einem zu niedrigen Wasserstand einschalten, es kann zur Beschädigung des Heizelements führen.
- Während des Betriebs erreicht der Wasserbehälter hohe Temperaturen und darf nicht angefasst werden, um akute Verbrennungen zu vermeiden.

**VII. Vorsichtsmaßnahmen:**

1. Wenn Sie das Gerät bewegen, verschieben Sie es bitte vorsichtig, klopfen Sie sie nicht hart darauf und vermeiden Sie die Zusammenstöße mit anderen Gegenständen (z.B. Möbel) und das Herunterfallen.
2. Wenn Sie das Gerät verschieben, halten Sie es in einer waagrecht, vermeiden Sie Erschütterungen und Vibrationen.
3. Quetschen Sie das Gerätegehäuse nicht, legen Sie die schweren Gegenstände nicht auf das Gerätegehäuse, um eine Verformung oder Verdrehung zu vermeiden.
4. Wählen Sie die Betriebsspannung in der Steckdose entsprechend der Markierung auf dem Gerät aus (AC 220V).
5. Das Gerät darf nicht in einem Badezimmer oder anderen feuchten Räumen benutzt werden.
6. Zur Vermeidung der möglichen Schäden, ziehen Sie bei einem Gewitter den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose.
7. Zur Vermeidung der Kurzschlusschäden, gießen Sie bitte keine Flüssigkeiten auf das Gerätegehäuse.
8. Wenn Sie das Gerät über eine längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose

**VIII. Technische Daten:**

1. Betriebsspannung: AC 220 Volt
2. Nennleistung: 620 Watt